

GC



色調追加で、さらに高い審美表現が可能になりました。

initial LiSi

リチウムシリケートガラスセラミックフレーム用
ベニアリング陶材

GC Initial LiSi

リジール
Lithium Silicate

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
デンチン	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
クリア フルオレッセ ンス	CL-F															
エナメル	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59
トランスルー セント	TN(neutral) TO(opal)															
トランスルー セントモディ ファイヤー	TM-01(blue) TM-02(white) TM-03(rosa) TM-04(yellow) TM-05(grey)															
エナメル インテンシブ	EI-11(grey) EI-12(yellow soft) EI-13(orange) EI-14(yellow)															
エナメル オクルーサル	EO-15(white) EO-16(yellow neutral) EO-17(violett/grey)															
エナメル オパール	EOP-1 EOP-2 EOP-3 EOP-4															
サービカル トランスルー セント	CT-21 CT-22 CT-23 CT-24 CT-25															
インサイド	IN-41 Flamingo IN-42 Terracota IN-43 Sun IN-44 Sand IN-45 Havana IN-46 Braail IN-47 Sienna IN-48 Kurkuma IN-49 Maracuja IN-50 Curry IN-51 Olive															
ジンジリル	GM-23															
フルオ デンチン	FD-91(light) FD-92(sunset) FD-93(sand)															
グレース	GL															
コレクション パウダー	COR															
ブリーチ デンチン	BLD-1(Light) BLD-2(White) BLD-3(XWhite)															
ブリーチ エナメル	BL-E(Enamel)															



※青字:色調追加

注目のリチウムシリケートガラスに審美性をプラス

イニシャルLiSiは、リチウムシリケートガラス製フレームに築盛する歯科用陶材です。基本となるシェードはビタクラシカルシェードを採用。特殊色を用いることによって、さまざまな色調再現が行えます。760℃付近で焼成するため、ブロック体やプレス体の形態を崩さない低融タイプの陶材です。リチウムシリケートガラス系材料への使用に適した諸特性とイニシャル特有の暖かみのある色調を有しています。

最適化された結晶構造による自然な光学的効果

天然歯を忠実に再現した光の拡散・透過性や蛍光性、乳白度、透光性に加え、表面の軽い研磨で光の反射を利用した、自然な輝きを得ることができます。

自然の美しさを提供する長石系セラミック

色調と表面性状は焼成を繰り返した後も変わることはありません。低くおさえた収縮率は作業時間の短縮につながり、形成およびシェーディングのための焼成において高い安定性が得られます。

リチウムシリケートガラスに合致した膨張特性


高い強度と自然な透明感で注目のリチウムシリケートガラスにマッチした、熱膨張係数 $9.3 \times 10^{-6}/K$ を実現。デンチン焼成温度は760℃と低く、繰り返し焼成での熱膨張係数の変化が少ないため高い安定性が得られます。

焼成温度	760℃	密度	2.4 g/cm ³
熱膨張係数	$9.3 \times 10^{-6}/K$	曲げ強度	90 MPa
ガラス転移温度	520℃	平均粒径	25 μm
溶解度	16 μg/cm ²		

スタンダード ビルドアップ法



バイオエстетック ビルドアップ法

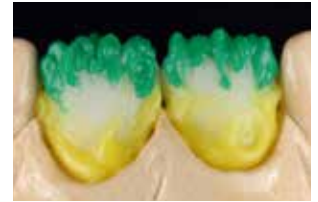

イニシャルLiSi ベーシックセット

【色調】ビタクラシカルシェード6色(A1/A2/A3/B1/B2/C2)
 【包装】イニシャルLiSi ベーシックセット:デンチン6本(D-A1、D-A2、D-A3、D-B1、D-B2、D-C2)、エナメル4本(E57、E58、E59、E60)、クリアフルオレッセンス1本(CL-F)、トランスルーセント2本(TN、TO)、ブリーチデンチン1本(BLD-2)、ブリーチエナメル1本(BL-E)、トランスルーセントモディファイヤー2本(TM-01、TM-05)各20g、コレクションパウダー1本、モデリングリキッド50mL2本、シェードチャート1枚、テクニカルマニュアル1冊、イニシャルステイングレーズ(Zr/AL/Ti用)GL10g1個、グレーズリキッド(ZR/AL/Ti用)25mL1本

【単品包装】デンチン、エナメル、クリアフルオレッセンス、ブリーチデンチン、ブリーチエナメル各20g1本
 インサイド、フルオデンチン、エナメルオクレーザル、エナメルインテンシブ、エナメルオパール、トランスルーセント、サービカルトランスルーセント、トランスルーセントモディファイヤー、ジンジバル、コレクションパウダー各20g1本 /
 モデリングリキッド50mL1本/デンチンカラーシェードガイド1枚/アディショナルカラーシェードガイド3枚入1セット

ジーシー イニシャル LiSi 管理医療機器 227AFBZX00124000

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。



イニシャルLiSi アドバンスドセット

【包装】イニシャルLiSi アドバンスドセット:エナメルオクレーザル1本(EO-15)、フルオデンチン3本(FD-91~93)、エナメルオパール3本(EOP2~4)、サービカルトランスルーセント4本(CT22~25)、インサイド11本(IN41~51)各20g、モデリングリキッド50mL2本

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
 東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC (デンタルインフォメーションセンター) 支店

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286